



RUMI®II Uterus-  
manipulatorsystem  
und Zubehör






## Perfekte Anpassung an die Anatomie jeder Patientin!

Das RUMI®II System ist ideal für alle Arten von laparoskopischen Eingriffen im Beckenbereich geeignet. Dem Chirurgen wird der Zugriff und die Sicht auf die Beckenanatomie um ein Vielfaches erleichtert. Die Manipulation mit dem wiederverwendbaren RUMI®II Uterusmanipulator kann manuell oder mit dem ALLY Uterine Positioning System™ erfolgen. Dank eines breiten Spektrums an Einweg-Spitzen/-Tips zum intrauterinen Gebrauch ermöglicht dieses System eine maximale Flexibilität.

Folgende Positionierungen an der Zervix sind möglich:

- Drehung 140°
- Anteversion 90°
- Retroversion 50°

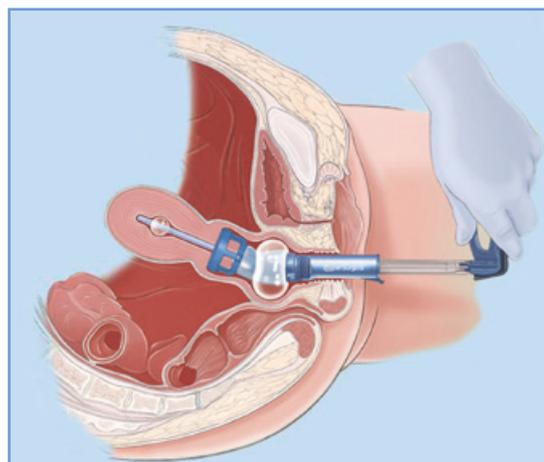

1	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
	RUMI®II Handgriff, wiederverwendbar	1	UMH650	8M020056

# Cups

2



2,5 cm

3,0 cm

3,5 cm

4,0 cm

## Koh-Efficient® System

Das Koh-Efficient® System vereint den Koh Cup™ und den Pneumo-Okklusionsballon in einem Produkt. Damit ist ein einfaches Befestigen auf dem RUMI®II Griff, sowie eine schnelle und zielgenaue klinische Positionierung möglich. Die Zervix wird mit dem Cup des Koh-Efficient Systems umschlossen und ermöglicht eine vollständige 140° Drehbewegung.

Dieses sterile Einweg-Produkt ist sowohl aus Kunststoff, für den Einsatz mit HF-Chirurgiegeräten, als auch aus Edelstahl, für den Einsatz mit Harmonischem Skalpell und Laser erhältlich.

Beide Ausführungen gibt es in vier verschiedenen Größen, wodurch sich das Koh-Efficient System ideal an die Anatomie der Patientin anpassen lässt.

2

Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Koh-Efficient® Kunststoff 2,5 cm	5	KC-RUMI-25	8M020062
Koh-Efficient® Kunststoff 3,0 cm	5	KC-RUMI-30	8M020063
Koh-Efficient® Kunststoff 3,5 cm	5	KC-RUMI-35	8M020064
Koh-Efficient® Kunststoff 4,0 cm	5	KC-RUMI-40	8M020065

Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
Koh-Efficient® Edelstahl 2,5 cm	5	KCS-RUMI-25	8M020091
Koh-Efficient® Edelstahl 3,0 cm	5	KCS-RUMI-30	8M020081
Koh-Efficient® Edelstahl 3,5 cm	5	KCS-RUMI-35	8M020076
Koh-Efficient® Edelstahl 4,0 cm	5	KCS-RUMI-40	8M020092

Schritt 1



Schritt 2




Schritt 3



Schritt 4



# Tips

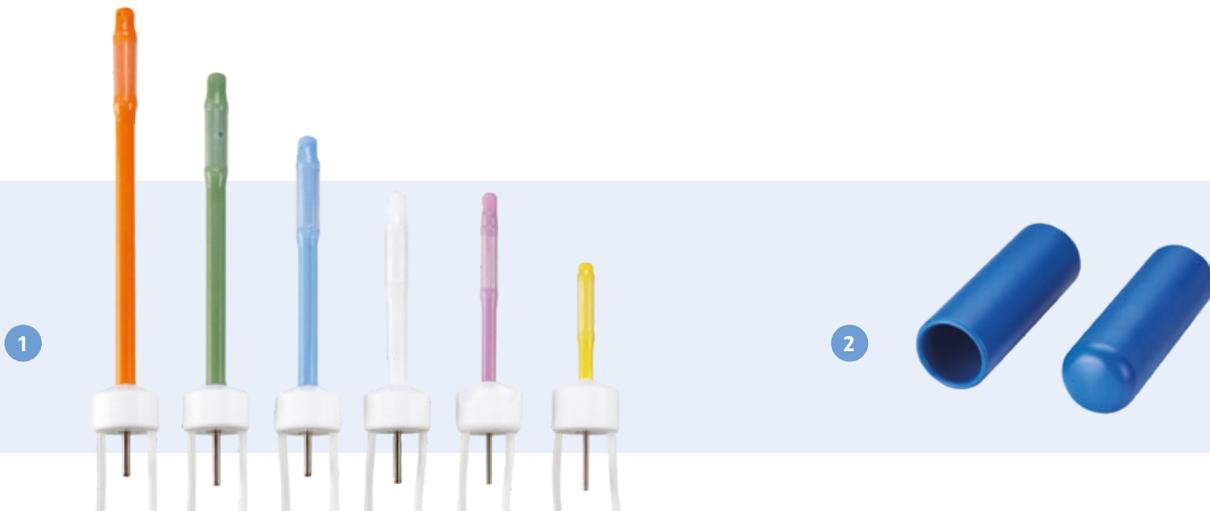

## Intrauterine-Tips/-Spitzen

Die Intrauterine-Tips/-Spitzen sind in sechs unterschiedlichen Größen erhältlich und mit dem RUMI®II und AdvinculaArch™ System kompatibel. Sie verfügen über ein weiches und flexibles distales Ende, wodurch sich das Risiko einer Uterusperforation und eines Gewebetraumas vermeiden lässt.

Der intrauterine Ballon kann mit Kochsalzlösung befüllt werden und sorgt selbst bei kaudaler Traktion für unübertroffene Langlebigkeit.

Die zentrale distale Öffnung und der Luer Lock Schlauchansatz erlaubt die einfache Applikation von Lösungen für die Cromopertubation.

1	Bezeichnung	Farbe	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
	Tip 5,1 x 3,75 cm	gelb	5	UMY514	8M020075
	Tip 5,1 x 6,0 cm	lavendel	5	UML516	8M020061
	Tip 6,7 x 6,0 cm	weiß	5	UMW676	8M020060
	Tip 6,7 x 8,0 cm	blau	5	UMB678	8M020058
	Tip 6,7 x 10,0 cm	grün	5	UMG670	8M020057
	Tip 6,7 x 12,0 cm	orange	5	UMO672	8M020059

## Sacrocolpoplexie-Tips

Die Platzierung von Netzgewebe während einer Sacrocolpoplexie kann umständlich und zeitraubend sein. Dafür bieten die Sacrocolpoplexie-Tips eine ideale Lösung, da die Vagina angehoben werden kann. Bei konstanter Spannung wird die Gewebemigration während des Anbringens des Netzgewebes minimiert. Die Einweg-Spitzen sind in drei verschiedenen Größen erhältlich. Sie sind kompatibel mit dem RUMI®II und auch AdvinculaArch™ System.

2	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
	Sacrocolpoplexy Tip 11,4 x 3,8 cm	3	SACRO-1	8M020111
	Sacrocolpoplexy Tip 9,0 x 3,2 cm	3	SACRO-1S	8M020108
	Sacrocolpoplexy Tip 11,4 x 3,8 cm	3	SACRO-1C	8M020112



# Sizer



## Cervical Sizer

Der wiederverwendbare Cervical Sizer ermöglicht, basierend auf der Anatomie einer jeden Patientin, die Auswahl der geeigneten Koh-Efficient® und ArchKoh-Efficient™ Größe.

3	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
	Cervical Sizer, wiederverwendbar	1	KC-SIZER	8M020082

# ALLY Haltearmsystem

1



## ALLY Uterine Positioning™

Das elektromechanische ALLY Uterus-Positioniersystem ermöglicht es den RUMI II Manipulator intraoperativ automatisch immer in der Position zu halten, wie es der Operateur benötigt. Es ersetzt komplett die Assistenz, welche sonst den Manipulator während der gesamten Prozedur halten muss.

Seitlich am OP Tisch befestigt, erfolgt die Konnektion über ein steriles Einmalcover mit integriertem Anschlussadapter für den Rumi II. Somit kann der Operateur das System via Fußschalter komplett aus dem sterilen OP Umfeld steuern. Das optimale System um die Ergonomie, wie auch die Ökonomie bei gynäkologischen Eingriffen, welche einen Manipulator erfordern, zu optimieren.



1	Bezeichnung	Stück/VE	Hersteller-ID	Artikel-Nr.
	ALLY Uterine Positioning System™ inkl. Fußschalter	1	AU-INT	8M020123
	Gerätewagen für UPS	1	AU-CART	8M020125
	Adapter Schutzhülle für RUMI®II und Advincla Arch™, steril	20	AU-AD	8M020124
	Schienenkloben für ALLY UPS (wiederverwendbar)	1	AU-KITF	8M020122

# Übersicht

Eingriff	geschätzte Zeit	RUMI®II	ALLY Priorität	empfohlenes Zubehör
Endometriose Exzision	0,75 – 2,0 h	X	mittel / hoch	Tip
Myomektomie	0,5 – 0,75 h	X	mittel / hoch	Tip
Oophorektomie	0,5 h	X	niedrig	Tip
Suprazervikale laparoskopische Hysterektomie	1,0 h	X	mittel / hoch	Tip + Koh-Efficient
Totale laparoskopische Hysterektomie	1,0 – 1,5 h	X	mittel / hoch	Tip + Koh-Efficient
Sacrocolpopexie	1,5 – 2,0 h	X	hoch	Sacro Tip
Diagnostik	-	X	-	Tip

## Impressum

Herausgeber: medimex GmbH, In den Fritzenstücker 9–11, 65549 Limburg.  
Fotos/Quellen: Alle Rechte wurden für den Katalog freigegeben.

Rechtshinweise: Nachdruck und Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung durch medimex GmbH gestattet. Sortimentsänderungen vorbehalten.

Keine Haftung bei Druckfehlern. Bild-, Produkt- und Farbabweichungen vorbehalten. Alle Abbildungen dieses Kataloges geben die abgebildeten Gegenstände zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, spätere technische und sonstige Änderungen behalten wir uns vor.

Unsere Vertriebspartner:

## SMS medipool

Robert-Koch-Straße 2a  
D-66299 Friedrichsthal  
Tel.: +49 6897 7909-0  
Fax: +49 6897 7909-99

[info@sms-medipool.de](mailto:info@sms-medipool.de)  
[www.sms-medipool.de](http://www.sms-medipool.de)

Landsberger Straße 65  
D-82110 Germering  
Tel.: +49 89 85604-0  
Fax: +49 89 85604-210

Burgwedeler Straße 193  
D-30916 Isernhagen  
Tel.: +49 511 367664-0  
Fax: +49 511 367664-50

[sms-nord@sms-medipool.de](mailto:sms-nord@sms-medipool.de)



Gersteinstraße 7a  
D-59227 Ahlen  
Tel.: +49 2382 9808-0  
Fax: +49 2382 9808-51

[info@bursch.de](mailto:info@bursch.de)  
[www.bursch.de](http://www.bursch.de)

Berthold-Beitz-Boulevard 420  
D-45141 Essen



Amlingstadter Str. 31  
96114 Hirschaid  
Tel.: +49 9543 21 660-0  
Fax: +49 9543 21 660-44

[www.chiromed.de](http://www.chiromed.de)  
[info@chiromed.de](mailto:info@chiromed.de)



**medimex GmbH**  
[www.medimex.de](http://www.medimex.de)

In den Fritzenstücker 9–11  
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300  
fax +49.6431.7302 235

**medimex** 