



medifa 8000 hybrid
Die smarte Hybrid-Lösung



medimex 

medifa – Herstellerkompetenz im Operationsaal





OP-Kompetenz unter einem Dach mit globalem Partner-Netzwerk

medifa ist ein inhabergeführter und weltweit agierender Komplettlösungsanbieter in der Medizintechnik. Das Produkt- und Leistungsportfolio deckt den kompletten Bereich an modularen Wand-, Tür-, Decken- und Schrank-Systemen (RooSy®Room Systems) für den schlüsselfertigen OP, Operationsleuchten sowie Operationstische mit Zubehör bis hin zu Sonderbaulösungen und Möbeln ab.

Mobiler Carbontisch mit Free-Float Control – medifa 8000 hybrid

Der mobile Carbontisch der nächsten Generation medifa 8000 hybrid ist in mehrfacher Hinsicht „hybrid“. Er kann hybrid gesteuert werden, freischwimmend oder elektrisch in alle Richtungen (horizontal bis zu 900 mm, vertikal bis zu 200 mm). Zudem ist er eine flexible und effiziente Lösung für mobile Hybrid-OP-Säle. Die Technik ist nicht fest in einem OP-Saal installiert, sondern wird bedarfs- und patientengerecht genau dort eingesetzt, wo sie benötigt wird. Die flache Carbon-Tischplatte mit integrierten Carbon-Normschienen sorgt für sehr gute Durchleuchtungseigenschaften bei geringer Strahlendosis, wodurch Bildgebungsgeräte besonders patienten- und anwenderschonend eingesetzt werden können. Eine Schnittstelle nach SDC-Standard ermöglicht die Kommunikation mit externen Bildgebungsgeräten.

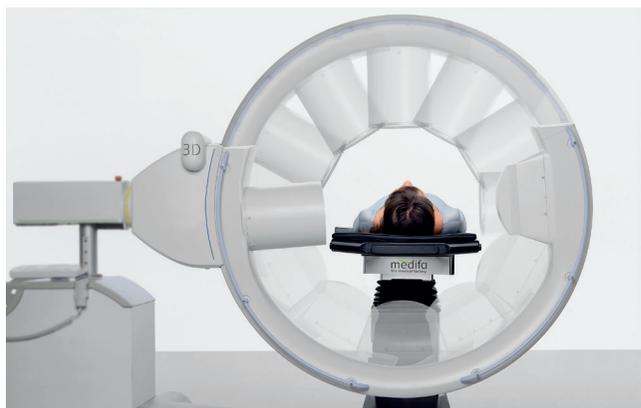

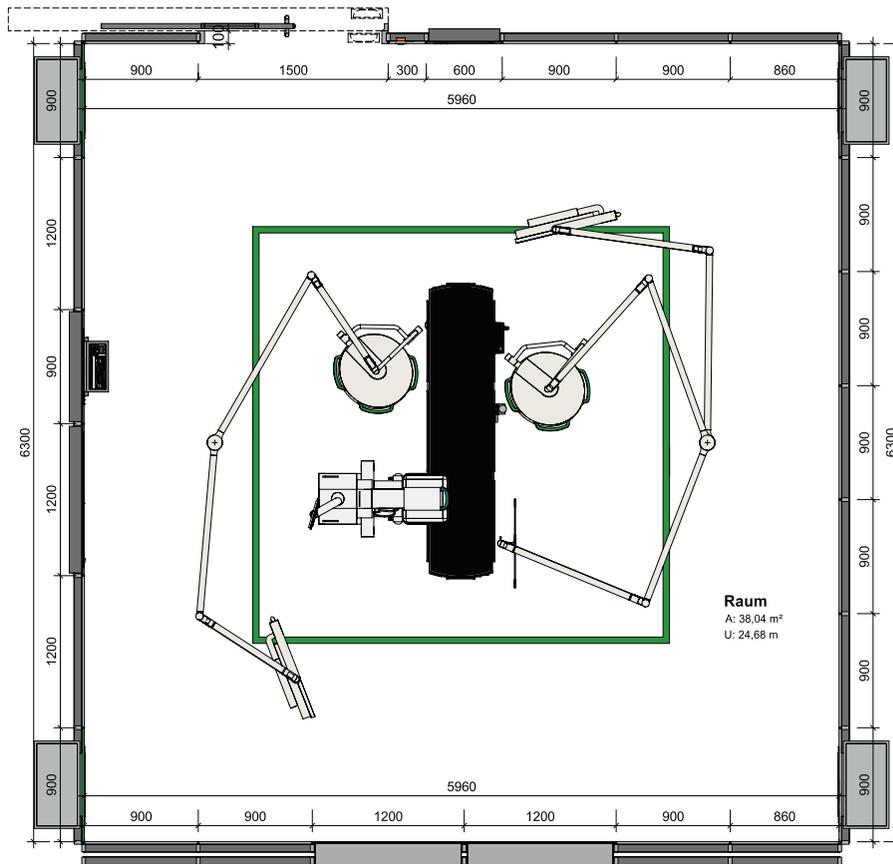

Die Entwicklung verfeinerter Operationsverfahren und der Einsatz von Spitzentechnologie im Operationssaal führt auch bei komplexen Eingriffen zu verbesserten Therapieergebnissen für Ihre Patienten.

Moderne Systeme zur intraoperativen Bildgebung und eine prozessoptimierte OP-Saal-Infrastruktur sind dafür heute wichtige Bestandteile.

Was technisch bislang oft nur in großen OP-Sälen umgesetzt werden konnte, wird mit der **Tiny OP**-Lösung jetzt flächendeckend in kleineren oder Bestands-OP-Räumen möglich.

Ein mobiler, strahlendurchlässiger CFK-OP-Tisch wird dazu mit einem hochwertigen mobilen 3D-Bildgebungssystem kombiniert*.

Dabei müssen Sie nicht auf die Möglichkeiten großer Lösungen verzichten.

Bildgebung, 3D-durchleuchtbare CFK-Lagerflächen sowie angepasste Beleuchtungssysteme mit gespiegelten Monitoren sind auch im **Tiny OP** Standard.


Ihre Vorteile einer **Tiny OP**-Lösung auf einen Blick:

- ✓ Exzellente Bildgebung inklusive 3D
- ✓ Integration des mobilen Röntgensystems an mobilen CFK-OP-Tisch*
- ✓ Einsetzbar in jedem Operationssaal
- ✓ Kein oder nur geringer Umbau erforderlich, dadurch planbare Kosten
- ✓ Interdisziplinäre Nutzung, daher keine Auslastungsthemen
- ✓ Der OP-Saal bleibt gleichermaßen als Standard-OP nutzbar

Wie sieht Ihr **Tiny OP** aus? Wir beraten Sie gerne.

*Integration mit ausgewählten Röntgenherstellern

Flexibilität – Effizienz – Sicherheit – Ergonomie

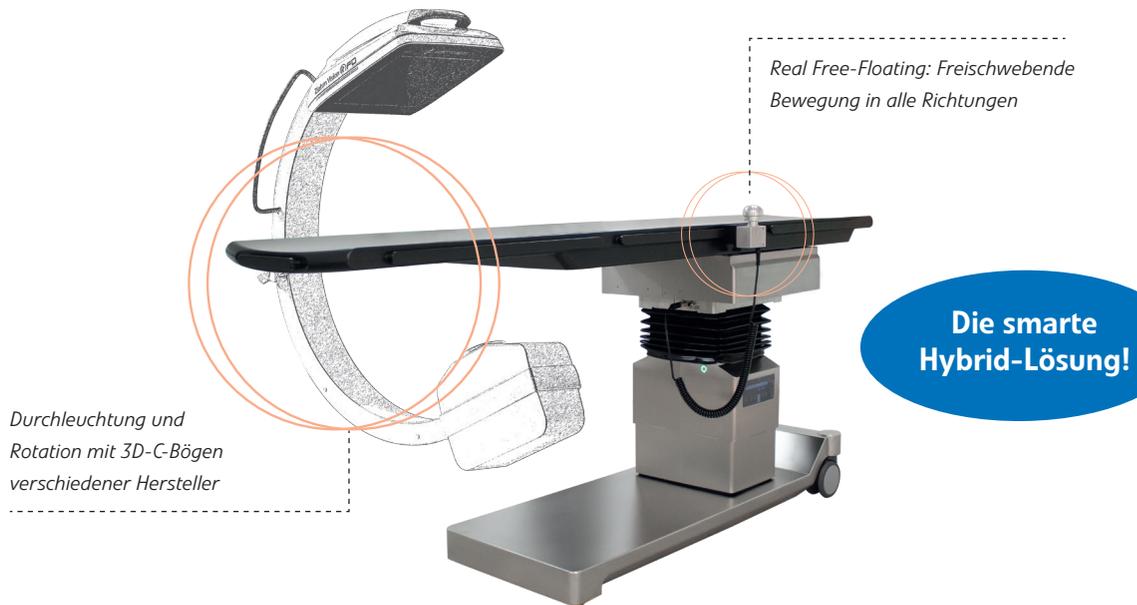

Angiografie

Gefäß-Chirurgie

Thorax-Chirurgie

Neuro-Chirurgie

Orthopädie

Unfall-Chirurgie

High-End-CarbonTisch

Mit 900 mm Längsverschiebung und hoher Belastbarkeit

Free Float + Elektrisch

Kontrastmittelverfolgung in Echtzeit mit Free-Float oder präzise elektronisch unterstützt

3D-Kompatibel

Durchleuchtung, Rotation mit 3D-C-Bögen verschiedener Hersteller

Integration-Ready

Schnittstelle zur Navigation mit C-Bögen ausgewählter Hersteller

Reduzierte Strahlendosis

Bei vergleichbaren Anwendungen

Budgetschonend

Keine Einbau- oder Umbaukosten

Mobil + Flexibel einsetzbar

Schonung vorhandener Raumressourcen! Integrierbar selbst in kleine Operationsräume. Interdisziplinär einsetzbar

Service On Demand



Schnell, einfach, zuverlässig. Serviceanforderung direkt am Produkt oder Hilfe zur Selbsthilfe

Made in Germany

Produktion, Vertrieb, Service – Empowered by medifa® - we care




Funktionen und technische Daten

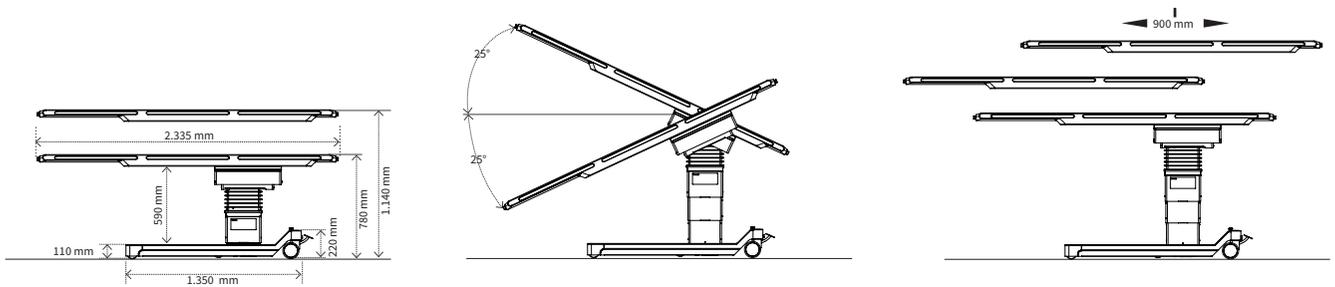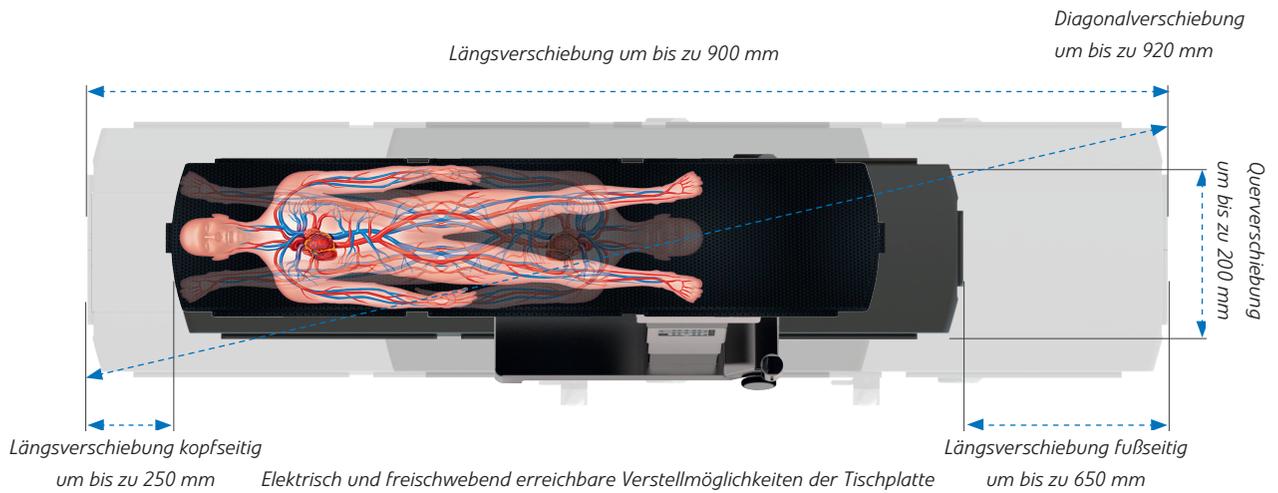

- Fahrbarkeit: Manuell
- Zentralbremse: Manuell
- Memory (3 Positionen): Elektrisch
- Maximal zulässige Gesamtbelastung 250 kg
- Höhenverstellung: 780 bis 1.140 mm

- Trendelenburg: $\pm 25^\circ$

- Längsverschiebbarkeit der Tischplatte: 900 mm
- Freischwimmende Tischplatte (Free Float)

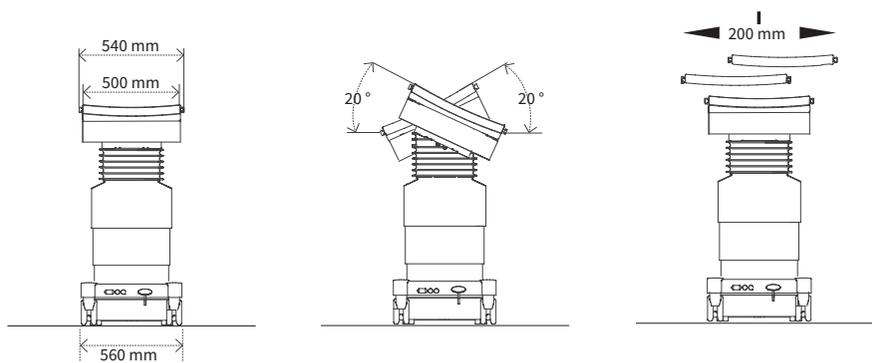

- Querverschiebbarkeit der Tischplatte: 200 mm
- Lateralverstellung: $\pm 20^\circ$

Weitere Informationen sowie Bestell- und Preisauskünfte erhalten Sie über unsere Vertriebspartner:

SMS medipool

Robert-Koch-Straße 2a
D-66299 Friedrichsthal
Tel.: +49 6897 7909-0
Fax: +49 6897 7909-99

Therese-Giehse-Platz 2
D-82110 Germering
Tel.: +49 89 85604-0
Fax: +49 89 85604-210

Burgwedeler Straße 193
D-30916 Isernhagen
Tel.: +49 511 367664-0
Fax: +49 511 367664-50

i-am-smart@sms-medipool.de
www.sms-medipool.de



VON UND FÜR
MENSCHEN.

Gersteinstraße 7a
D-59227 Ahlen

Tel.: +49 2382 9808-0
Fax: +49 2382 9808-51

i-am-smart@bursch.de
www.bursch.de



medimex GmbH
www.medimex.de
i-am-smart@medimex.de

In den Fritzenstücker 9–11
D-65549 Limburg

fon +49.6431.7302 300
fax +49.6431.7302 235

medimex 